




MODE D'EMPLOI

Article N° : 42 900 40/41/42/43/45/46/47/48/49/50/51
42 910 41

GARROT CLIPCOMED

Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins d'un membre pour arrêter ou atténuer la circulation sanguine. Les conditions de désinfection et d'utilisation et de stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits contenant du caoutchouc dans les bandes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètres ainsi que l'intégrité des produits associés avant utilisation.

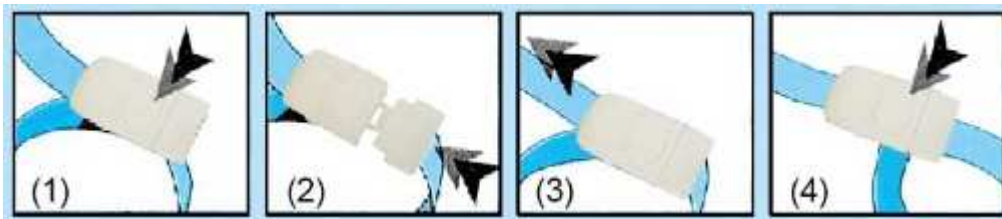

1. Appuyer sur le bouton pour ouvrir le garrot
2. Enclencher avec l'attache pour le fermer
3. Tirer pour garrotter
4. Appuyer sur l'attache pour la stase

PRECAUTION D'EMPLOI :

Vérifier avant utilisation que la bande ne présente pas de détériorations ou de coupures.
Ne jamais exposer à une température supérieure à 80°C. Respecter le mode d'emploi.